

How to Apply QR (Quick Relief)[®] Powder

(for minor external wounds)

Clean wound and apply only when bleeding resumes.

QR Powder needs blood to work.

For Cuts and Lacerations



1. **PEEL** back of blister.



2. **POUR** onto blood. Completely cover the wound. Occasionally upon application, a temporary warming or stinging sensation is felt.



3. **TAP & PRESS** for 30 seconds to form the protective scab and stop the bleeding.

Repeat application if needed. The protective scab is safe to leave in place until it falls off naturally. Avoid wetting the scab for one hour.

For Sliced Fingertips



1. **POUR** onto blood. Completely cover the wound. Occasionally upon application, a temporary warming or stinging sensation is felt.



2. **TAP & PRESS** for 30 seconds to form the protective seal. Repeat application until bleeding stops.




3. **WRAP.** For added protection, wrap with gauze or bandage.

If QR Powder must be removed as determined by a healthcare professional, brush away loose powder then soak wound in sterile water until scab starts loosening from wound. Gently scrape off loosened scab with gloved finger or tongue depressor.

Warnings: FOR EXTERNAL USE ONLY. Not intended to replace stitches. Seek medical attention if wound requires stitches. Do not apply QR Powder to arterial bleeding or visibly infected wounds. Keep out of reach of children. May be harmful if inhaled or ingested. Avoid aspirating the product into the nasal or oral cavity. Avoid contact with eyes; if contact should occur, thoroughly rinse eyes with water. Seek medical attention if any irritation persists or if bleeding continues because this could be an indication of a more serious problem.

CAUTION: Store in a clean, dry place. Use by the expiration date listed. Discard if dispenser is damaged, opened, or if powder has clumped and does not flow freely. Discard contents after use, since QR Powder is guaranteed to work only if it has not been left exposed to air or humidity.

Ingredients: Hydrophilic polymer and Potassium salt.

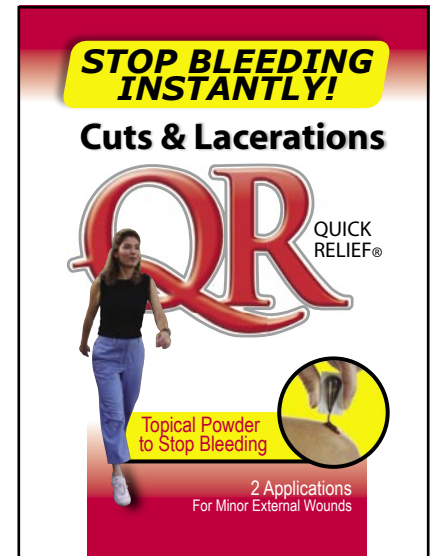

Instrucciones para el uso del polvo QR (Alivio Rápido)[®]

(Para heridas externas menores.) Limpiar la herida y permitir que la sangre salga. El polvo QR necesita sangre para ser activado.

Para Cortadas y Laceraciones



1. **DESPEGAR** la lengüeta en la parte de atrás.



2. **VIERTA** el polvo cubriendo completamente la herida. Ocasionalmente, se puede percibir una sensación temporal de calor o de ardor.



3. **HACER PRESIÓN** por 30 segundos para formar el sello protector y detener el sangrado.

Repita la aplicación si es necesario. El sello protector puede permanecer en la herida hasta que se caiga naturalmente. Evite que el sello se moje por una hora.

Para Cortadas en la Punta de los Dedos



1. **VIERTA** el polvo cubriendo completamente la herida. Ocasionalmente, se puede percibir una sensación temporal de calor o de ardor.



2. **HACER PRESIÓN** por 30 segundos para formar el sello protector. Repita la aplicación hasta que la herida deje de sangrar.



3. Para dar una protección adicional, enrollar el dedo con gaza.

Si el polvo PRO QR se debe remover por indicación de un profesional del cuidado de la salud, apartar el polvo suelto y luego remojar la herida en agua esterilizada hasta que el sello protector comience a despegarse de la herida. Raspe suavemente el resto del mismo con los dedos protegidos por un guante o con un depresor de lengua

SOLO PARA USO EXTERNO. No reemplaza puntos de sutura. Buscar asistencia médica en caso de necesitar puntos de sutura. El polvo QR no se debe aplicar sobre arterias que sangran, sobre heridas que sangran abundantemente o sobre heridas visiblemente infectadas. Guardar este producto lejos del alcance de los niños. Evitar inhalar o ingerir. Evitar el contacto con los ojos. Si se produce contacto, limpiar muy bien con agua. Buscar asistencia médica si la irritación persiste o si el sangrado continúa porque esto podría ser una indicación de un problema más grave.

PRECAUCIÓN: Conservar en un lugar limpio y seco. Usar antes de la fecha de expiración indicada en la caja. Después de utilizar el polvo del dispensador, deseche el resto del contenido ya que el polvo QR es garantizado que trabaja solamente si no ha sido expuesto al aire o a la humedad.

Ingredientes: Polímero hidrofílico y Sal de potasio.

