

How to Apply QR Powder

For Nosebleeds

(Use only in the lower part of the nasal cavity). Gently blow nose to clear clots and apply only when bleeding resumes. QR needs blood to work. Do not tilt head during application. Hold breath while applying QR Powder to avoid sneezing and coughing.



1. **Peel** back of blister.



2. **Load Applicator.** Roll applicator to load with as much powder as possible. Hold breath while applying QR Powder to avoid sneezing and coughing.



3. **Roll Against Nasal Wall,** then roll applicator around the nostril. Occasionally a temporary warming or stinging sensation is felt.



4. **Pinch Nose** for 15 seconds.


Repeat application as needed. Avoid disturbing the QR Powder while the nose heals.

If QR Powder must be removed as determined by a healthcare professional, brush away loose powder then soak wound in sterile water until seal starts loosening from wound. Gently scrape off loosened seal with gloved finger or tongue depressor.

Warnings: FOR EXTERNAL USE ONLY. Not intended to replace stitches. Seek medical attention if wound requires stitches. Do not apply QR Powder to arterial bleeding or visibly infected wounds. Keep out of reach of children. May be harmful if inhaled or ingested. Avoid aspirating the product into the nasal or oral cavity. Avoid contact with eyes; if contact should occur, thoroughly rinse eyes with water. Seek medical attention if any irritation persists or if bleeding continues because this could be an indication of a more serious problem.

CAUTION: Store in a clean, dry place. Use by the expiration date listed. Discard if dispenser is damaged, opened, or if powder has clumped and does not flow freely. Discard contents after use, since QR Powder is guaranteed to work only if it has not been left exposed to air or humidity.

Ingredients: Hydrophilic polymer and Potassium salt; one applicator included.

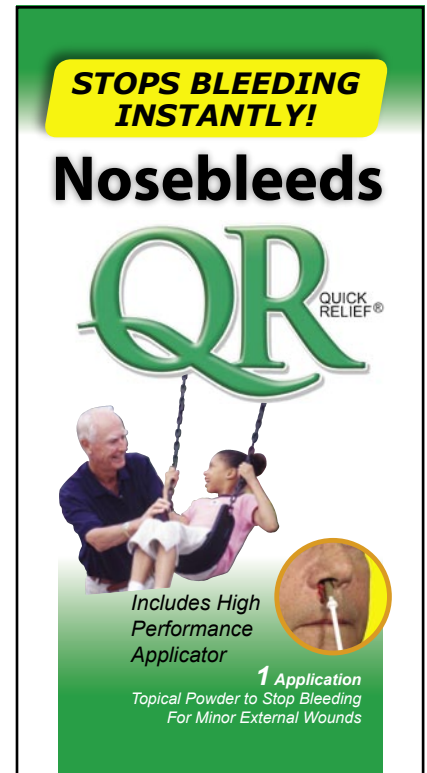

Instrucciones para el uso del polvo QR

Para el sangrado nasal (aplicar únicamente en la parte baja de la cavidad nasal) Soplar la nariz con el fin de limpiar el conducto nasal de coágulos; aplicar únicamente cuando la nariz está sangrando. No incline la cabeza durante la aplicación.



1. Despegar la lengüeta en la parte de atrás.



2. Girar el aplicador dentro del polvo para cubrirlo con tanto polvo como sea posible. Retener la respiración durante la aplicación del polvo QR para evitar tos y estornudos.



3. Girar primero el aplicador contra la pared nasal después contra el resto de la cavidad nasal. Ocasionalmente, se puede percibir al aplicar una sensación temporal de calor o de ardor.



4. Apretar la nariz durante 15 segundos.

Repita la aplicación si es necesario. Evite tocar el polvo de la nariz hasta cuando sane completamente. Si el polvo PRO QR se debe remover por indicación de un profesional del cuidado de la salud, apartar el polvo suelto y luego remojar la herida en agua esterilizada hasta que el sello protector comience a despegarse de la herida. Raspe suavemente el resto del mismo con los dedos protegidos por un guante o con un depresor de lengua.

SOLO PARA USO EXTERNO. Aplicar únicamente en la cavidad nasal anterior. No reemplaza puntos de sutura. Buscar asistencia médica en caso de necesitar puntos de sutura. El polvo QR no se debe aplicar sobre arterias que sangran o sobre heridas visiblemente infectadas. Guardar este producto lejos del alcance de los niños. Puede ser dañino si se inhala o se ingiere. Evite inhalar el producto en la cavidad nasal y oral. Evitar el contacto con los ojos. Si se produce contacto, limpiar muy bien con agua. Buscar asistencia médica si la irritación persiste o si el sangrado continúa porque esto podría ser una indicación de un problema más grave.

PRECAUCIÓN: Conservar en un lugar limpio y seco. Usar antes de la fecha de expiración indicada en la caja. Después de utilizar el polvo del dispensador, deseche el resto del contenido ya que el polvo QR es garantizado que trabaja solamente si no ha sido expuesto al aire o a la humedad.

Ingredientes: Polímero hidrofílico y Sal de potasio; un aplicador está incluido.

